



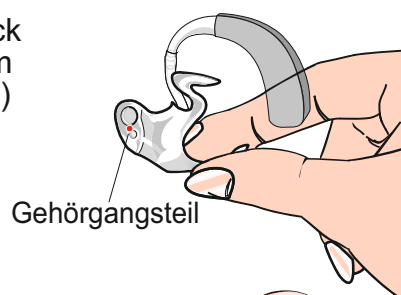


Rechte Markierung = **ROT**

Linke Markierung = **BLAU**


- 1 Der richtige Griff:** Vor dem Einsetzen das Ohrstück mit Daumen und Zeigefinger am unteren Krallenende (roter Pfeil) anfassen. Das Gehörgangsteil bildet die Verlängerung der Zeigefingerspitze.

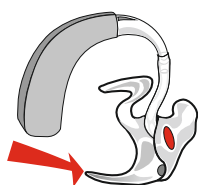


- 2 Ansetzen:** Beim Heranführen ans Ohr (hier rechts) die **S-förmig gebogene Spitze** der Kralle immer nach oben halten. Die Hand dabei nicht mit dem Unterarm drehen (gefülltes Wasserglas).

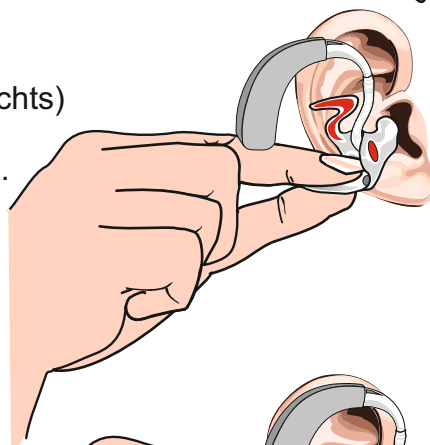


- 3 Einführen:** Nun führen Sie das Gehörgangsteil von hinten Richtung Nase in den Gehörgang ein. Er tasten Sie dabei auch mit der S-förmigen Spitze die Hautfalte über dem Gehörgang (roter Pfeil).

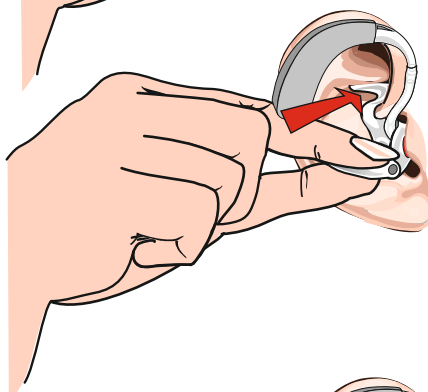

- 4 Nachsetzen:** Jetzt können Sie den Daumen wegnehmen und mit dem Zeigefinger das Ohrstück erst in Richtung Nase, dann im rechten Winkel nachschieben. Bleiben Sie dabei im unteren 1/3 des Ohrstückes und helfen Sie evtl. mit kreisenden Bewegungen nach.

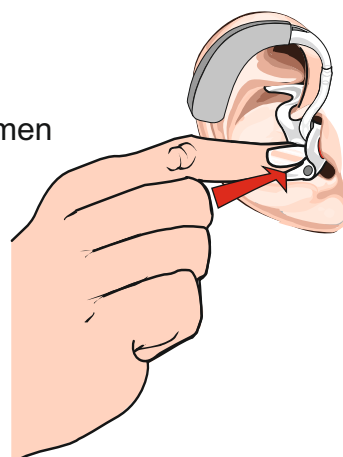

- 5 evtl. Nachhelfen:** Bei manchen, tief ausgeprägten Ohrmuscheln muss man durch Ziehen am Ohrläppchen nach schräg hinten den Weg für die untere Spange freimachen.

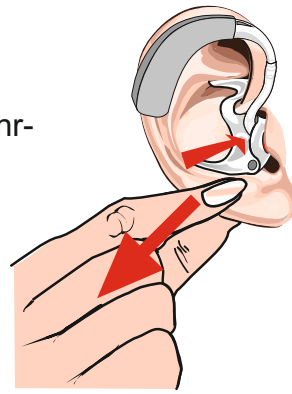

- 6 Gerät hochsetzen:** Sitzt das Ohrstück nun korrekt im Ohr, nimmt man das Gerät seitlich hoch bis zur Schläfe und schiebt es am Kopf entlang von vorne über das Ohr. Beim seitlichen Hochnehmen bitte den Schallschlauch nicht verdrehen und abklemmen.




korrekter Sitz:



alle Teile sitzen in den dafür vorgesehenen Vertiefungen.


Druckgefahr:

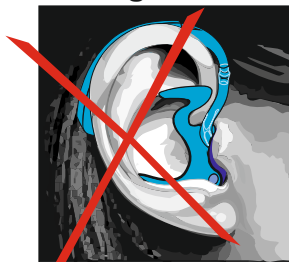


das Ohrstück wirkt auffällig und erzeugt Druckstellen am Ohr.

Sollten in den ersten Tagen trotz korrektem Sitz Druckstellen entstehen, kommen Sie umgehend zu uns. Wir helfen sofort. **!**

Telefonieren

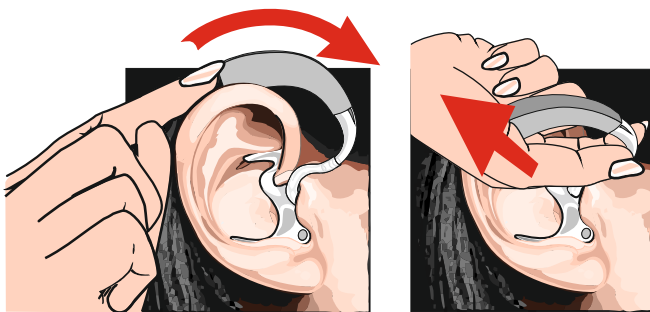

Das Herausnehmen aus dem Ohr ist einfach: Gerät hinterm Ohr nach vorne schieben und seitlich fallen lassen. (Keine Sorge, ein richtig eingesetztes Ohrstück hält das Gerät sicher.) Am Übergang Hörwinkel/Schallschlauch anfassen und mit kreisenden Bewegungen am Schlauch seitlich/schrägben herausziehen. Auch hier ist die Sorge um ein Abreißen des Schlauches unbegründet.

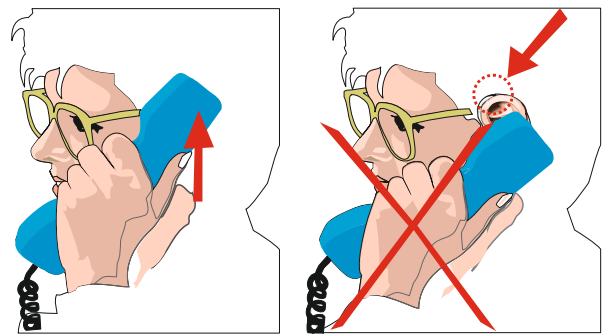

Das Telefonieren mit Hörgerät ist anfangs ungewohnt. Hat das Ohrstück eine große Zusatzbohrung kann man wie gewohnt telefonieren. Bei den meisten Geräten muss man jedoch den Hörer ca. 2 Finger nach oben verschieben, da das Mikrofon des Gerätes an der oberen Kante der Ohrmuschel liegt(Pfeil rechte Abb.)

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an: ☎ 06257-90 40 70