

Die tägliche Pflege

Tägliche Pflege Ihrer Hörgeräte erhält die Leistung Ihres wertvollen Hörsystems!
In unseren Geschäften können Sie kostenlos Ihre Hörsysteme reinigen und überprüfen lassen.



Pflegeseite Homepage

Hörgeräte werden ständig am Körper getragen. Dadurch können z.B. Schweiß und Ohrschmalz (Cerumen) den Geräten schaden und sie in der Funktion beeinträchtigen. Wenn Sie jedoch folgende Punkte beachten, werden Sie lange Freude an Ihren Geräten haben.



Trockensysteme entziehen den Geräten die Feuchtigkeit, die durch Schweiß eindringt.



Pflegtücher zur äußeren Reinigung von Gerät, Schirmchen und Hörer.

- **Setzen Sie Ihre Hörgeräte nie direkter Sonneneinstrahlung aus und halten Sie sie von starken Wärmequellen wie z.B. Heizung fern.**
- **Nehmen Sie Ihre Hörgeräte zum Schwimmen oder Duschen heraus. Eindringendes Wasser kann die Funktion der Geräte beeinträchtigen**
- **Über Nacht sollten Hörgeräte im Trocknungsgerät gelagert werden. So wird schädliche Feuchtigkeit entfernt und dadurch die Lebensdauer erhöht. (wichtig im Sommer)**
- **Bewahren Sie Ihre Hörgeräte unterwegs immer im dafür vorgesehenen Etui oder in der Trockendose auf.**
- **Bei Mini-Geräten mit externen Lautsprechern sollten Schirmchen und Filter regelmäßig gepflegt werden. (> Seiten 2+3)**
- **Ein klassisches Ohrpassstück mit Schlauch wird über Nacht in Reinigungsflüssigkeit gelegt, um es zu säubern (> Seite 4). Bei Geräten mit Dünnschlauch (Slimtube) kann der abgetrennte Schlauch mit Warmwasser/Seife gereinigt werden. Danach trocknen!**



Cerumenschutz austauschen bei älteren Phonak + Widex

Ihr Hörsystem ist mit einem Cerumenschutzfilter ausgestattet, der den Lautsprecher vor Ohrenschmalz (Cerumen) schützt.


Überprüfen Sie den Cerumenschutz regelmäßig und tauschen Sie ihn aus, wenn er verunreinigt aussieht oder wenn Sie bemerken, dass die Lautstärke oder die Klangqualität nachgelassen hat. Der Cerumenschutz sollte alle vier bis acht Wochen gewechselt werden.

Folgende Beschreibung gilt nur für Hörer mit Schirmchen! Bei fest eingebauten Hörern prüfen Sie die Zugänglichkeit des Filters oder fragen Ihren Akustiker.



1

Zunächst ziehen Sie das Schutzschirmchen vom Lautsprecher vorsichtig ab.

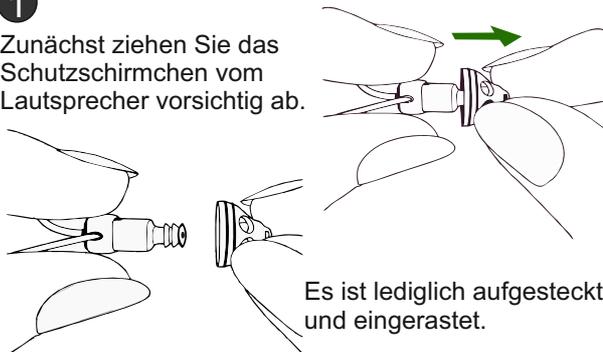

Es ist lediglich aufgesteckt und eingerastet.


2

Reinigen Sie den Lautsprecher und das Schirmchen mit einem fusselfreien Tuch oder unseren Reinigungstüchern.




3

Stecken Sie den Entfernungstift des schwarzen Austauschwerkzeugs bis zum Anschlag in den weißen Cerumenschutz des Lautsprechers ein.

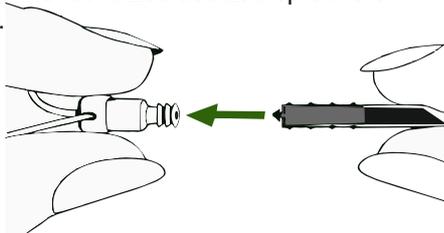


Ziehen Sie den gebrauchten Cerumenfilter aus dem Lautsprecher gerade heraus. Ohne zu drehen!!!

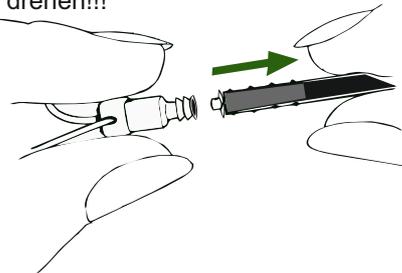

4


Drehen Sie das Wechselwerkzeug um 180° und stecken Sie den neuen Cerumenfilter (weiß) an der Spitze des Werkzeugs in die Lautsprecheröffnung, bis er perfekt sitzt.

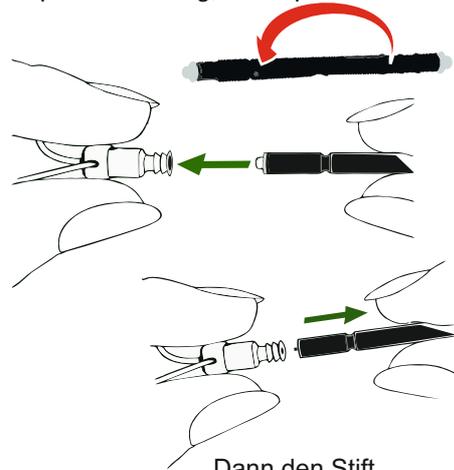


Dann den Stift wieder gerade herausziehen.

5

Nun wird das Schutzschirmchen wieder über den geriffelten Stutzen des Lautsprechers aufgeschoben, bis es sicher eingerastet ist.

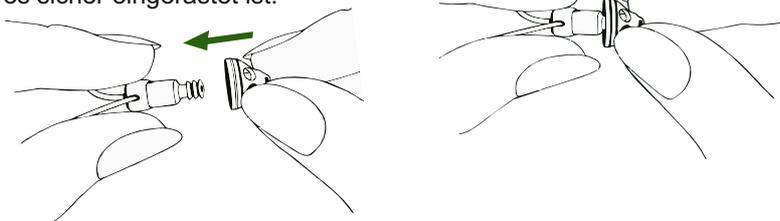



so sieht das fertige Werk aus am Beispiel eines rechten Lautsprechers.

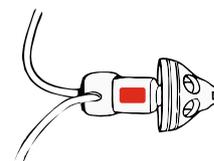

Cerumenschutz austauschen bei Oticon-Systemen




Entfernen Sie zunächst evtl. Schirmchen, wie auf der vorhergehenden Seite in Schritte 1+2 gezeigt und reinigen Sie den Hörer wie beschrieben.

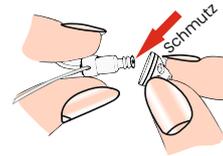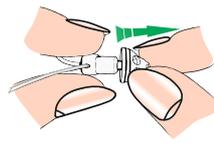


1 Vorbereitung

Nehmen Sie das Werkzeug aus dem Etui. Das Werkzeug hat zwei Stifte, einen **leeren** zum Herausnehmen des alten Cerumenschutzes und einen mit dem neuen Cerumenschutz ist mit einem • gekennzeichnet!

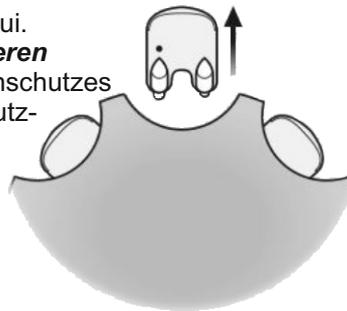

2 ... alt raus!


Drücken Sie den leeren Stift in den Cerumenfilter im Hörer und ziehen Sie ihn heraus.

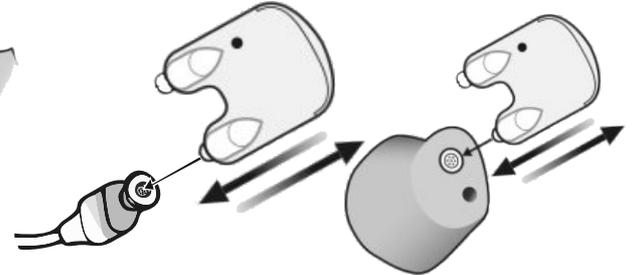


Sitzt der Filter fest eingebaut und schwer zugänglich in einer Otoplastik, bringen Sie bitte das Gerät zum kostenlosen Service zu uns.

3 ...neu rein!

Setzen Sie den neuen Cerumenfilter mithilfe des **anderen** • Stifts ein, nehmen Sie das Werkzeug heraus und entsorgen Sie es.

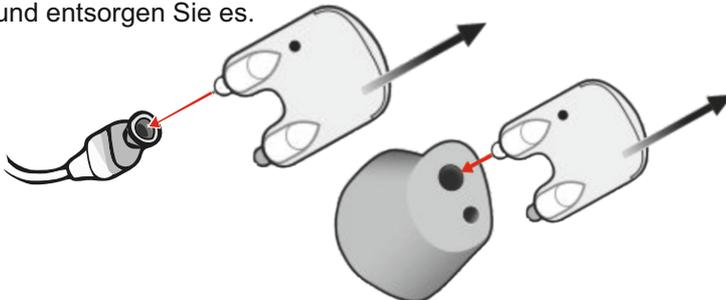

und so geht's bei den neuen Phonak Hörern 4.0 (nur bei abziehbaren Schirmchen!)

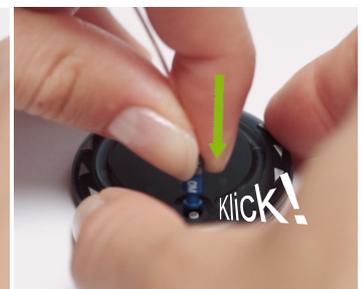

1 Vorbereitung

Das CeruShield™ Disk muss vor Erstbenutzung erst auf ein neues Filterelement nach rechts gedreht werden. Das hakt öfter mal!

2 Schirmchen ab

Um an den verbrauchten Filter zu gelangen, wird zunächst das Schirmchen vorsichtig abgezogen und gereinigt.

3 ... alt raus!

Jetzt fasst man den Hörer fest an und drückt ihn von senkrecht oben fest in das mit 1 markierte Loch. Dann den Hörer wieder langsam herausziehen.

4 ...neu rein!

Nachdem der alte Filter entfernt wurde, drückt man erneut von senkrecht oben den Hörer in das mit 2 gekennzeichnete Loch bis der neue Filter fest einklickt. Nun das gereinigte Schirmchen wieder aufsetzen!

Reinigung eines Klassik-Ohrstückes

mit klassischem Reinigungsset

- 1** Trennen Sie durch kräftiges Ziehen den Schallschlauch vom Hörwinkel Ihres Gerätes. Achten Sie bei 2 Geräten darauf, daß die Seiten nicht verwechselt werden können.
- 2** Legen Sie nur das Ohrstück (auf keinen Fall mit Hörgerät!) mit der verschmutzten Gehörgangsseite nach unten auf das Sieb. Bei starker Verschmutzung mit warmem Wasser vorreinigen.
- 3** Füllen Sie die Dose mit Reinigungsflüssigkeit bis das Ohrstück gut bedeckt ist. (Hadeo liquid soft). Oder füllen Sie die Dose mit 1cm Reinigungsflüssigkeits-Konzentrat und anschließend mit Wasser 3/4 voll auf. (Verhältnis 1:5)
- 4** Bei geschlossenem Deckel mindestens 20-30 Minuten, oder über Nacht, reinigen lassen. Der Deckel schließt dicht und verhindert auch bei Nichtgebrauch Austrocknung und versehentliches Verschütten.
- 5** Nehmen Sie das Sieb aus der Dose heraus - Ohrstück mit warmem Wasser gut abspülen und abtrocknen. Danach den Deckel wieder verschließen.
- 6** Den HADEO-Airball fest in den Schallschlauch stecken und mehrmals kräftig durchpusten. Flüssigkeitsreste werden aus dem Schallschlauch und den anderen Hohlräumen entfernt. Nicht zu vergessen ist auch die Zusatzbohrung am unteren Ende des Ohrstückes (falls vorhanden).
- 7** Zum Schluss nur noch den Hörwinkel des Gerätes in das Schlauchende des Ohrstückes drücken und den Schlauch aufschieben. Bei 2 Geräten auf die richtige Seite achten! (Position, wie in der Abb. unten.) Ist der Schlauch hart und spröde geworden, sollte er beim Akustiker durch einen neuen ersetzt werden.

Nach 6-10 Reinigungen sollte die Reinigungsflüssigkeit aus hygienischen Gründen erneuert werden.

Tipps

Wollen Sie auf Reisen weniger Ballast mitnehmen, kann man sich mit der Mitnahme des Airballs behelfen. Etwas Spülmittel/ Seife und warmes Wasser reinigen das Ohrstück ausreichend. Trocknen wie oben beschrieben. Auch Schwitzwasser im Schallschlauch kann mit dem Airball entfernt werden. **Nicht im Schallkanal herumstochern!**

richtige Positionierung



häufige Ohrstückformen

