

# Was? Wie? Wohin?



was, wie, wohin-Seite


Zu Beginn ist die Orientierung mit den neuen Lauschern etwas schwierig. Jedoch schon nach einiger Zeit stellt sich, mit täglicher Übung, Routine ein wie beim Anlegen einer Armbanduhr.

Ein Hinter-Ohr-Gerät ist prinzipiell ein bananenförmig gebogenes Teil mit einem Anhängsel, was ins Ohr gehört. Stellen Sie sich vor, dass das Ende des Brillenbügels parallel zum Gehäuse des Hörgerätes steht- Brillenbügel innen, Gerät außen! Der Schlauch/Kabel läuft vor dem Ohr senkrecht nach unten. (Bspl.rechts)



## Die Links- Rechtsfrage


Wenn Sie die Geräte in Trageposition vor sich halten, zeigen die Hörer / Ohrstücke zur Mitte.

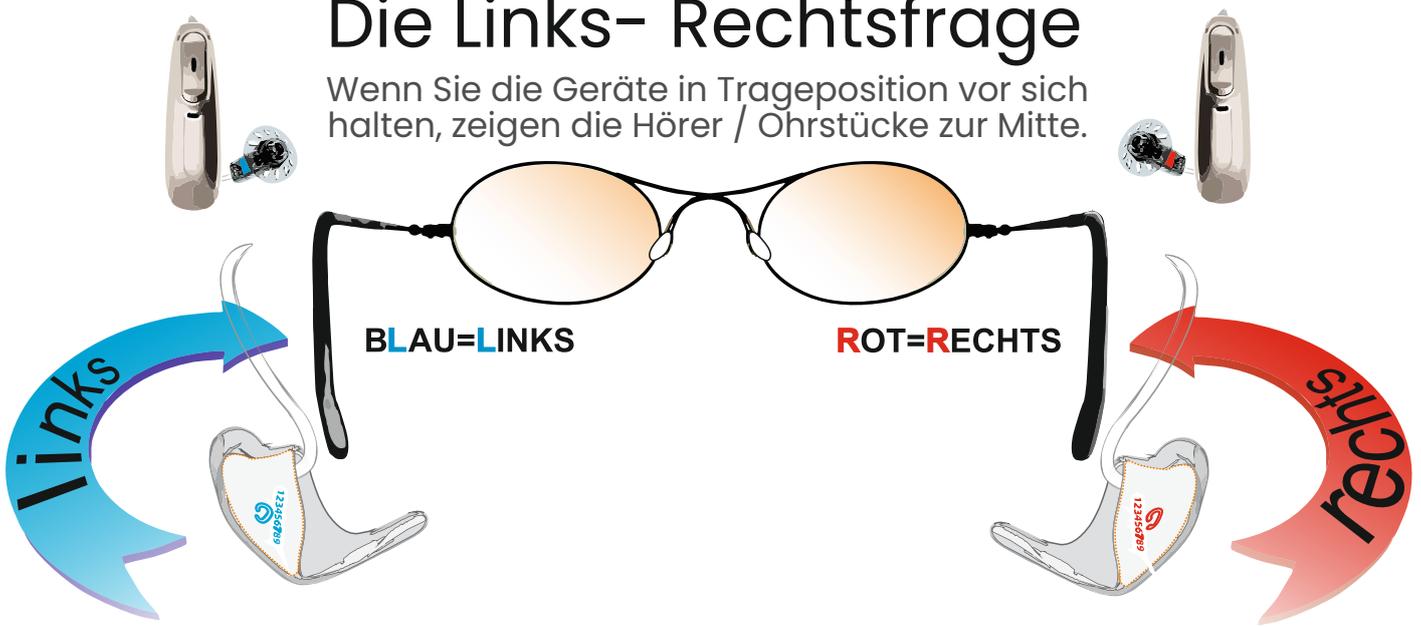

Die Farbmarkierung für **Rechts/Rot** und **Blau/Links** finden Sie auf den Ohrstücken, Hörern oder unterm Schirmchen. Zusätzlich ist dieser Farbcode auch oft im Batteriefach oder an der Unterseite des Gerätes zu finden.

Zum Einsetzen wird dieses **rechte** Ohrstück 90° horizontal nach links gedreht um den richtigen Einsetzwinkel zu bekommen. Die flache Seite nach vorne, zunächst Richtung Nase, dann wieder zur Kopfmittle hin einführen. Dies gilt auch für Gehörschutz ohne das grün markierte Ende.


Dieses Ende nach hinten ausrichten und in die äußere Ohrmuschel unten einsetzen; auch bei Ring- oder Krallenformen.

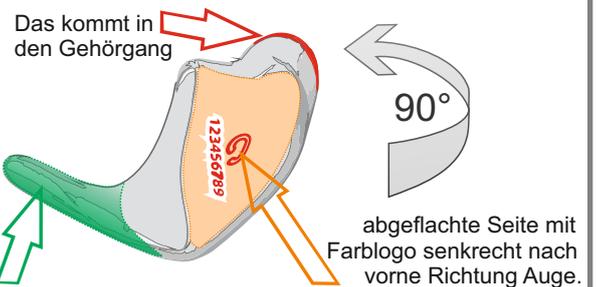

# Das Einsetzen mit Schirmchen

(Bei Ex-Hörern oder Slimtube-Geräten. Bspl. rechtes Ohr)


## 1 Aufsetzen:

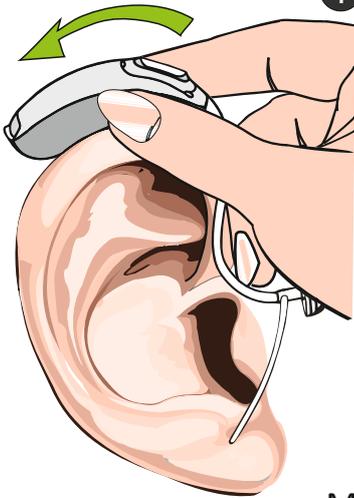

Als erstes klemmen Sie das Gerät wie einen Brillenbügel aufs / hinteres Ohr, so dass das Schläuchlein vor dem Ohr senkrecht nach unten läuft. (so hält es erstmal)


## Ansetzen: 2

Nun fassen Sie das Kabel unten am Bogen des Ohrteils an und führen es Richtung Gehörgang aus Richtung schräg/hinten. Manche machen auch Schritt 2 und 1 zusammen mit Hilfe der 2. Hand.

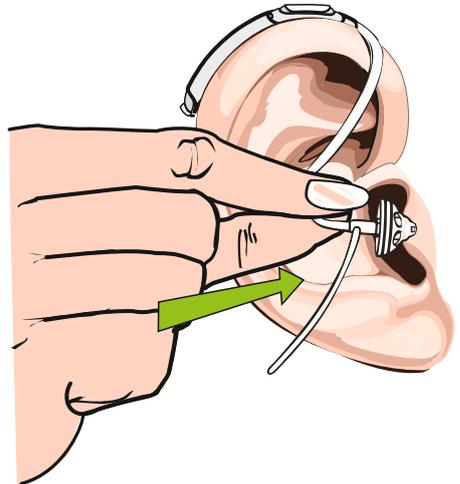


## 3 Einführen:

Führen Sie das Ohrteil in den Gehörgang, als wollten Sie Ihren Zeigefinger ins Ohr stecken. Ist ein Stützfaden angebracht, bleibt dieser zunächst noch außerhalb.

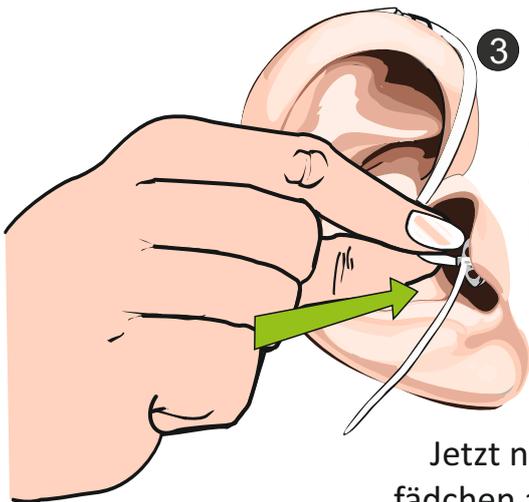

## Nachsetzen: 4

Jetzt nur noch das seitliche Stützfädchen anfassen und nach hinten / oben anheben. Der Stützfaden wird über den kleinen Höcker im Ohrmuschelboden geführt und senkt sich zum Schutz gegen Herausrutschen unauffällig in die Ohrmuschel

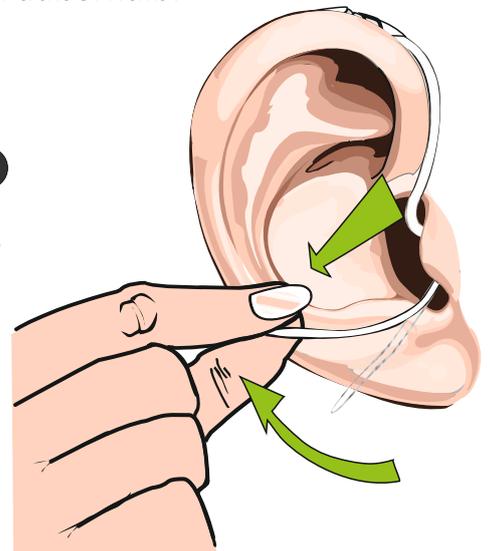

## 3 Geschafft ! :

Hier nun das Musterbeispiel am rechten Ohr mit Stützfaden zum Sichern im Ohrmuschelboden.

